

# Medicvent savukaasun kohdepoistojärjestelmä

Medicvent kohdepoistojärjestelmä takaa täysin savuttoman leikkaussalin. Suojaa henkilökuntaa ja potilasta altistumasta myrkyllisille savukaasuille.

  
**MEDICVENT**  
Cleaning air in healthcare

## Järjestelmän esittely

Medicvent Autostart -kohdepoistoautomaatiikan toiminnot on helppo synkronoida diatermialaitteeseen ja se on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien laitteiden kanssa.

## Autostart -ohjain

Liitetään diatermialaitteeseen anturin tai indikaattorikaapelin kautta.

Ohjaa kohdepoistovenktiiliä : imu auki/imu kiinni

- kun diatermialaite on aktivoitu; venttiili aukeaa
- venttiili sulkeutuu kun diatermialaite on standby -tilassa

Venttiilin sulkeutimisviivettä voidaan säätää 2 - 8 sekunnin välillä.

## Toiminnot:

### Automatic:

Ohjaa automaattisesti venttiiliä diatermialaitteen kautta; imu auki/imu kiinni

### Open:

Kohdepoistovenktiiliä aina auki

### Closed:


Kohdepoistovenktiiliä aina kiinni

### Replace filter:

Pääsuodattimen LP-10 vaihdon ilmaisim

## On/Off -venttiili

Ohjataan Autostart - ohjaimen kautta  
Avautuu/sulkeutuu toimintojen mukaisesti  
Pääsuodattimen LP-10 pidike  
Kiinnitys laitekiskoon.

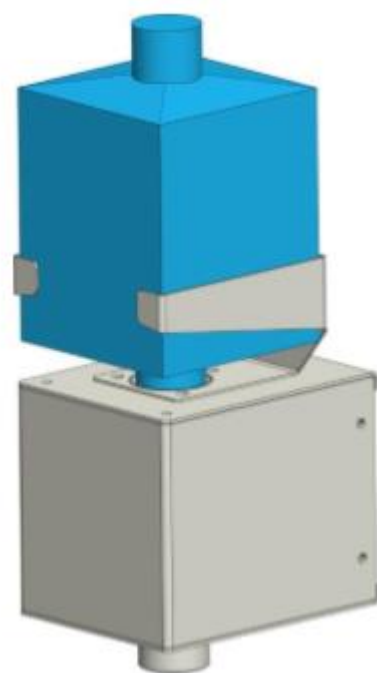

**SaVa**

Sa-Va Sairaalaravuste Oy  
Tiilitie 16  
01720 VANTAA  
Puh..09-5617 120  
info@sa-vasairaalvaruste.fi  
www.sa-vasairaalvaruste.fi